


SENSA

# Автомобильная массажная подушка SM-2101

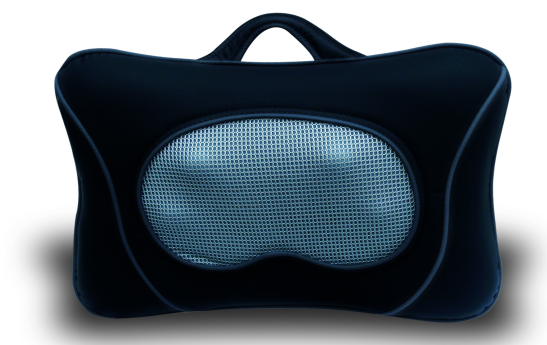

**РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

## Техническая спецификация

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Модель                | RT-2101                                     |
| Питание               | 220-240 В                                   |
| Частота               | 50/ 60 Гц                                   |
| Потребляемая мощность | 36 Вт                                       |
| Работа от:            | - розетки<br>- автомобильного прикуривателя |

### Требования к окружающей среде

- Не используйте прибор во влажном или пыльном помещении.
- Не используйте при температуре выше 40°C.
- Не храните прибор на улице.

### Противопоказания:

Не рекомендуется пользоваться автомобильной подушкой:

- Людям, находящимся на специальном лечении;
- Людям, имеющим травмы;
- Людям с высоким давлением, сердечными заболеваниями, церебральным артериосклерозом, тромбозом сосудов головного мозга;
- Беременным женщинам и женщинам в менструальный цикл;
- Людям, страдающим хроническими заболеваниями;
- Людям, страдающим от остеопороза.
- Людям со встроенными в организм электронными медицинскими приборами.

### Инструкции по использованию пультом управления:

- Не используйте пульт влажными руками.
- Не бросайте пульт на землю.
- Не тяните провод питания.
- Не располагайте на пульте тяжелые предметы.

### Важно!

- Убедитесь, что ролики находятся близко к обеим частям шеи, и нет никаких дискомфортных или болевых ощущений.
- Не засыпайте во время использования массажера.
- Не направляйте массажные элементы напрямую к рукам, локтевым суставам, коленям, груди и живота.
- Не используйте массажер после принятия алкоголя.
- Рекомендуемый сеанс массажа - 30 минут.

В следующих случаях следует прекратить использование массажной подушки, выключить и отключить от питающей розетки:

- На прибор или пульт управления пролита вода;
- Повреждена наружная часть массажной подушки, и видны внутренние элементы

- Вы чувствуете дискомфорт во время использования
- Сбой функций или внезапное отключение прибора
- Землетрясение
- Быстрая езда

### Инструкции по безопасности

1. Используйте необходимое напряжение для подключения прибора
2. Не оставляйте прибор без присмотра после подключения его к питанию
3. Не располагайте на приборе предметы
4. В случае возникновения повреждений провода питания или других частей не проводите ремонт самостоятельно. Прекратите использование и обратитесь в службу сервиса
5. При возникновении нежелательного эффекта или дискомфорта прекратите использование
6. Не располагайте прибор в жарком месте

### Названия и функции каждой из частей

#### Внешняя структура



#### Инструкции к пульту управления

Нажмите клавишу «Left» ( для запуска разминающего массажа против часовой стрелки; соответствующий индикатор загорится зеленым цветом.

Нажмите клавишу «Right» ( для запуска разминающего массажа против часовой стрелки; соответствующий индикатор загорится зеленым цветом.

Включение: После подключения прибора к розетке, нажмите клавишу «Power» для включения массажной подушки; соответствующий индикатор загорится красным. Массажная подушка будет работать в режиме ожидания. Затем нажмите клавишу «Left» или «Right» для запуска разминающего массажа.

Нажмите клавишу «Power» снова, чтобы выключить прибор.

Функция прогрева: Нажмите клавишу «Heat» во время массажа; соответствующий



индикатор загорится красным цветом. Для отключения прогрева нажмите клавишу «Heat» снова.

## Использование

### Подготовка

Убедитесь, что подушка полностью исправна и не имеет видимых повреждений.

### Использование

1. Подключите провод к питающей розетке
2. Выберите функции с помощью пульта управления.
3. После использования выключите прибор, нажав клавишу «Power», и отключив от питающей розетки.

### Устранение неисправностей

|   | Проблема           | Причина                                                                                                                                                                                   | Решение                                                                                               |
|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Звук               | Звук связан с трением внутреннего механизма о внешнее покрытие                                                                                                                            | Это нормальная работа прибора                                                                         |
| 2 | Прибор не работает | <ul style="list-style-type: none"><li>• Прибор сильно нагревается из-за длительного использования</li><li>• Провод питания выскочил из разъема/ питающей розетки/ прикуривателя</li></ul> | <p>- Отключите прибор более чем на 30 минут</p> <p>-Проверьте, плотно ли подключен провод питания</p> |

### Содержание и уход

1. Отключайте прибор от питающей розетки перед чисткой прибора.
2. Используйте сухую и мягкую ткань для внешней очистки прибора.
3. Во время хранения выключайте прибор и вынимайте штепсель из питающей розетки, храните провод питания в сухом и чистом месте.
4. Не позволяйте прибору находиться длительное время под прямыми солнечными лучами, не храните массажер в жарком месте.

### Гарантийный талон

Автомобильная массажная подушка – 1 год.

Гарантия распространяется только на непосредственного покупателя массажера и прекращается при смене владельца массажера. Гарантия распространяется на дефекты материалов и сборки. Гарантия не распространяется на массажеры, находящиеся в коммерческом использовании.

Гарантия не распространяется на естественный износ материалов и их выцветание. В случае невозможности провести необходимый ремонт, Sensa оставляет за собой право заменить массажер на новый, адекватный по стоимости неисправному массажеру на дату приобретения. В этом случае расходы по доставке массажера несет его владелец.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- небрежного хранения или транспортировки;
- нарушения правил эксплуатации;
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ;
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром;
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
- если в конструкцию массажного кресла вносились изменения.
- использование изделия не по назначению;
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов;

В случае необходимости доставки массажной подушки в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых SENSEA гарантий. Все перечисленные выше гарантии действуют в случае, если письменное уведомление получено SENSEA в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно сопровождаться документом, подтверждающим факт совершения покупки.

Имя покупателя \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Адрес доставки массажера \_\_\_\_\_

Город \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Наименование товара \_\_\_\_\_

Компания - продавец \_\_\_\_\_

Адрес Продавца \_\_\_\_\_

Город \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_